


## Traubenkernkissen für Nacken 40x65 "Blau-Rot" - die natürliche Alternative zur Wärmflasche und zum Cool-Bag

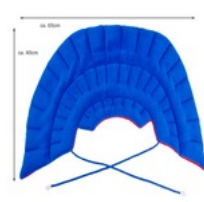

### Beschreibung

Die natürliche Alternative zur Wärmflasche und zum Cool-Bag.

#### VORTEILE VON TRAUBENKERNKISSEN

- 2 in 1 Produkt mit Doppelanwendung (warm/kalt)
- gleichmäßige und dosierbare Wärme- und Kälteverteilung
- Speicherung von Temperaturen über eine lange Zeit (länger als jede Wärmflasche)
- trockene Oberfläche und hohe Anschmiegsamkeit an jede Körperpartie
- gute Stützfunktion für eine zusätzliche Hoch- oder Seitenlagerung
- durch massierende Bewegungen mit dem Kissen fördern Sie die Durchblutung und Feinmotorik von Händen, Füßen und anderen Körperteilen
- bedürfnisgerechte Formen durch die breite Modellpalette
- haltbar und wiederverwendbar
- hygienischer Vorteil durch Waschbarkeit
- einfacher Aufwärm- und Abkühlprozess (Mikrowelle, Backofen, Heizkörper, Gefrierfach)
- 100%iges natürliches Füllmaterial
- Made in Austria

#### ANWENDUNG WARM:

Unsere Traubenkernkissen eignen sich hervorragend für den Einsatz als Wärmekompressen.

- muskulären Verspannungszuständen bei Fehl- und Überlastungen
- Nackensteife
- Ischiasbeschwerden
- Schulterbeschwerden

- Kreuzschmerzen
- Bandscheibenproblemen
- Gelenkschmerzen
- Rheuma/Arthrose
- Migräne
- Erkältungskrankheiten
- Regelschmerzen
- Koliken
- Blasen- und Nierenentzündungen
- kalten Füßen
- Schlafproblemen

und bei allen Wehwechen des täglichen Lebens.

#### **GEBRAUCHSINFORMATION WARM**

Kissen in der Mikrowelle bei 800 Watt (keine Grillfunktion) je nach Größe und Gewicht (siehe angehängtes Etikett) erwärmen. Alternativ können Sie das Kissen im Elektro-Backofen (keine Grillfunktion) bei 120 Grad ca. 3 - 5 Minuten erwärmen. Ein Unterschreiten der maximalen Erwärmungszeit ist jederzeit möglich, ein Überschreiten kann zu Produktschäden führen. Beim nochmaligen Erwärmen (noch temperiertes Produkt) das Kissen zuvor durchschütteln und die Aufwärmzeit halbieren! Das 37Grad-Wärme-Kälte-Kissen einfach auf die Schmerzstelle legen! Wichtig: Die 37Grad-Kissen kann man in der Waschmaschine im Wäschennetz bei 30°C bedingt waschen. Kein Weichspüler, nicht schleudern, nicht in den Trockner! Achten Sie auf einen raschen Trocknungsprozess. Kein Spielzeug für Kinder!

#### **ANWENDUNG KALT**

Unsere Traubenkernkissen eignen sich hervorragend für den Einsatz als Kältekomresse.

- Sportverletzungen
- Zerrungen
- Schwellungen
- Prellungen
- Verstauchungen
- Entzündungen
- Blutergüssen
- Kopfschmerzen
- Zahnschmerzen
- Migräne
- Schmerzlinderung bei Augenreizungen (z.B. bei Heuschnupfen)

und bei allen Wehwechen des täglichen Lebens.

#### **GEBRAUCHSINFORMATION KALT**

Kissen mindestens 5 Stunden in einem Plastikbeutel (damit das Kissen nicht den Geruch von Speisen annimmt) in das Gefrierfach legen. Das 37Grad-Wärme-Kälte-Kissen einfach auf die Schmerzstelle legen! Wichtig: Die Original 37Grad-Kissen kann man in der Waschmaschine im Wäschennetz bei 30°C bedingt waschen. Kein Weichspüler, nicht schleudern, nicht in den Trockner! Achten Sie auf einen raschen Trocknungsprozess. Kein Spielzeug für Kinder!

#### **HERGESTELLT IN ÖSTERREICH**

ZIRBELINO legt Wert auf Regionalität! Diese Traubenkernkissen werden nachhaltig und fair [in Österreich produziert](#) und ihr bekommt sie in der bewährten Qualität geliefert.

#### **PRODUKTINFO**

Größe: 40x65cm, Füllgewicht: 1250g, Material: Synthetikstoff/Nikistoff. Dieses Kissen ist in seiner Größe und Form besonders für den Nacken-Schulterbereich geeignet. Es setzt dort an, wo Verspannungen beginnen und behandelt somit die gesamte Nacken-Schulter-Muskulatur. Durch die vielen Absteppungen ist dieses Kissen anatomisch durchdacht und legt sich perfekt ihren Körperkonturen an. Da es vom Okziput über den Schultergürtel bis vor zum Brustbereich langt, kann dieses Kissen auch bestens bei Verkühlungen/Grippe eingesetzt werden.